



Hyagen



*Stick*

## Vítejte ve světě Hyagen® Stick

Od roku 1950 byly učiněny první pokusy s elektrickým proudem v kosmetickém ošetření. Od 90. let byly metody stále více zdokonalovány.

Elektrofyzikální kosmetické ošetření bylo dále vyvinuto do účinné léčebné metody v oblasti anti-agingu. Přední vědci se domnívají, že elektrofyziální kosmetika může překlenout propast mezi tradiční a tradiční kosmetikou, pokud jde o způsob účinku a výsledky. Kosmetika a estetická chirurgie.





## Co je elektrokosmetika?

Lidské tělo je "tekutým vodičem elektřiny". Všechny tělesné tekutiny obsahují ionty, které se také trvale tvoří (např. rozpouštěním solí). Pokud je na kůži přivedeno malé elektrické napětí prostřednictvím anodové desky, elektricky nabitě částice (ionty), které jsou již přítomny v těle, začnou migrovat na anodovou desku v závislosti na jejich elektrickém náboji.

Přímo pod povrchem kůže je působením napětí vytvářen pohyb.

Pečující produkty jsou díky tomuto trvalému pohybu iontů optimálně začleněny do pokožky.

Účinnost objednávky od

Ošetřující produkty s Hyagen® Stick mnohonásobně převyšují produkty pro ruční aplikaci.

Kromě toho iontové pohyby uklidňují nervové receptory a zlepšují krevní oběh a tok lymfy.

Hyagen® je pečující přípravek dokonale sladěný s tyčinkou Hyagen® Stick.



## *Funkční režimy:*

### **Absorpce účinných látek / masáž**

Klinické studie prokázaly, že při ruční aplikaci může maximálně 15 % účinných látek obsažených v krémech proniknout kožní bariérou. Pokud se nyní použije Hyagen® Gel, speciálně vyvinutý pro Hyagen Stick, a zapracuje se do pokožky pomocí Hyagen Stick pomocí aktivovaného režimu "Absorpce / Rovnováha účinných látek", může kožní bariérou projít až 80 % účinných látek, aby se mohl účinek plně rozvinout.

Hyagen je gel speciálně vyvinutý pro tyčinku Hyagen Stick, který má vynikající pečující vlastnosti a je obohacen o speciální aktivní složky vyvinuté pro elektrofyzikální kosmetické ošetření.

Výsledkem jsou buňky, které absorbují více vlhkosti a tím navracejí pokožce svěžest a pružnost a zároveň redukují vrásky.

## *Aplikace*

Stisknutím spínače "Šipka nahoru" zapnete zařízení. Aktivuje se ošetřovací hlavice pro oční okolí.

Po stisknutí spínače "šipka dolů" se aktivuje ošetřovací hlavice pro obličej.

Chcete-li zařízení vypnout, přesuňte spínač do střední polohy (neutrální poloha)



## Absorpce účinných látek / masáž

1

Tragen Sie Hyagen denní a noční sérum  
Intenzivní na obličej.

2

Uzavřete obě kontaktní lišty na  
stranou zařízení rukou a začněte s léčbou.

3


Použijte Hyagen Stick k masáži hya-  
Jemně naneste Denní® a noční sérum Intense  
nebo jiný krém proti vráskám do pokožky  
obličeje a očního okolí.

4

Ukončete léčbu, jakmile dojde k jejímu  
Pečující přípravek byl zcela absorbován  
pokožkou.

5

Po použití si obličej neumývejte5

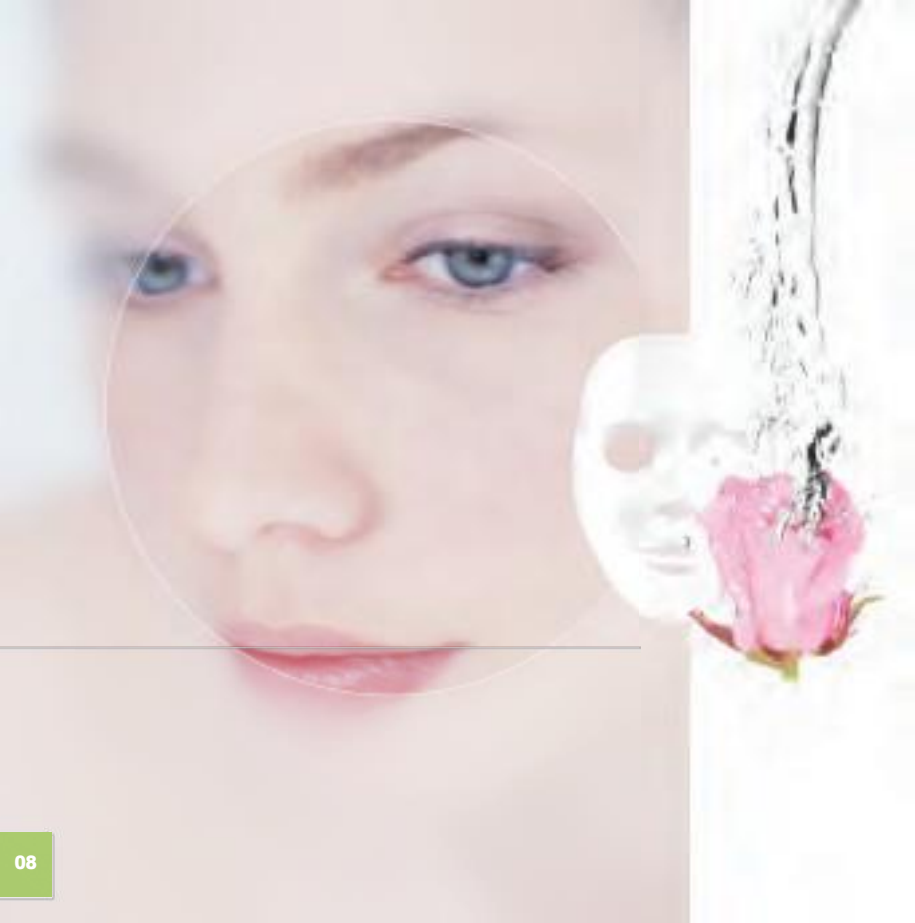



## Kůže

Neutrální horní část mastná pleť	1krát denně; 5 - 10 minut Citlivá / 1 Změřte všechny 3-4 střechy; 5 - 10 minut
Citlivý konec / Extrémně mastná pleť	1krát týdně, maximálně 5 minut
Zestárlá pleť	1krát denně; 10 - 15 minut
Oči	Kůže kolem očí je velmi citlivá. Zůstaňte na bodu maximálně 2 sekundy.

## Rady

Při používání se vždy dotýkejte dvou bočních iontových kontaktních proužků zařízení.



*100% přírodní*

## *Hyagen® Intenzivní denní a noční sérum*

Hyagen® je gel speciálně vyvinutý pro tyčinku Hyagen® Stick, který má vynikající pečující vlastnosti a je obohacen o speciální aktivní složky vyvinuté pro elektrofyzikální kosmetické ošetření.

Kyselina hyaluronová se přirozeně ukládá v kůži i v jiných oblastech našeho těla. Látka je produkována samotným lidským tělem a vyznačuje se až 1000násobným ukládáním vody ve vztahu k vlastní hmotnosti, čímž je zajištěna optimální hydratace a pevnost pokožky.

S přibývajícím věkem produkce kyseliny hyaluronové v těle neustále klesá. Kůže ztrácí hustotu, pružnost a pružnost. Vznikají vrásky. Vnější vlivy, jako je silné sluneční záření nebo znečištění z okolního prostředí a prachu, mohou podporovat výskyt únavy pokožky a urychlit proces stárnutí.

Díky zvýšené absorpci vlhkosti má Hyagen® obzvláště napínací účinek. Hyagen® - Denní a noční sérum je 100% přírodní a neobsahuje žádné živočišné složky. Kyselina hyaluronová se nachází ve všech buňkách lidského těla; alergické reakce jsou proto extrémně vzácné.

Díky biotechnologickým výrobním procesům se upouští od kyseliny hyaluronové živočišného původu.

## Údržba

- Pravidelná údržba a čištění zajišťuje optimální výsledky a prodlužuje životnost zařízení.
- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte Hyagen Stick na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Aby nebyla ohrožena bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, nesmí být prováděna žádná rozšíření, seřizování, úpravy nebo opravy.
- Prodloužení, nové zaměstnance, změny nebo opravy mohou provádět pouze osoby oprávněné společností Canbolat Vertriebs GmbH.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- K čištění použijte mírně navlhčený a měkký hadřík.
- Nepoužívejte agresivní látky, jako je čisticí mléko nebo jiné prostředky na mytí nádobí, protože mohou poškodit povrch.
- Zařízení neopravujte. Neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit.
- Po každém použití odstraňte z Hyagen Stick kosmetiku nebo jiné zbytky.
- Spotřebič pravidelně čistěte čistým hadříkem.
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu

## Varování

- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Zařízení není vodotěsné - nedotýkejte se ho s vodou.
- Zařízení skladujte v suchém prostředí.
- Ujistěte se, že zařízení není vystaveno silným vibracím
- Zařízení neotevírejte ani se jej nepokoušejte opravit.
- Lidé s kovovými implantáty, kardiostimulátory nebo těhotné ženy by se měli před použitím poradit s lékařem.
- Zařízení se nesmí používat na rány, ekzémy nebo nádory Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Před použitím odstraňte piercing, náušnice nebo jiné kovové předměty.
- Nepodávejte zapnuté zařízení přes oči. Zařízení nepoužívejte, pokud máte alergii na kovy.
- Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte spotřebič ve vlhkém nebo damp prostředí.
- Nepoužívejte zařízení pod vodou, např. ve sprše.
- Nikdy nepřivádějte spotřebič do přímého kontaktu s ohněm, plynem, kyslíkem nebo horkými předměty, jako jsou varné desky.

- Se zařízením zacházejte opatrně, aby nemohlo spadnout nebo se jinak poškodit.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy se zařízením, okamžitě jej odneste k opravě. Nepokoušejte se to opravit sami.
- Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte jej.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za vaši bezpečnost a nebyly poučeny o tom, jak zařízení používat.
- Nenoste zařízení za kabel ani nepoužívejte kabel jako rukojeť.  
Když aplikaci ukončíte, nastavte všechny přepínače do polohy Off/Off/0 a odpojte napájení.
- Prodlužovací kabely používejte pouze v případě, že jste se předtím ujistili, že jsou v dobrém stavu.  
Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.
- Hyagen Stick smí být použit pouze k původnímu účelu.

## Likvidace

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly musí být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EHS o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transpozici do vnitrostátní práva musí být elektrické nářadí, které již není použitelné,

jsou shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V rámci EU tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být vyhazován do domovního odpadu. OEEZ obsahuje cenné recyklovatelné materiály, které by měly být recyklovány a aby nepoškodovaly životní prostředí nebo lidské zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu.

Staré spotřebiče proto zlikvidujte prostřednictvím vhodných sběrných systémů nebo zašlete spotřebiči k likvidaci na místo, kde jste jej zakoupili. Tím se pak zařízení odešle k recyklaci materiálu.

### Akumulátory a baterie

Nevyhazujte dobíjecí baterie do domovního odpadu, vody nebo ohně. Baterie by měly být shromažďovány, recyklovány nebo likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pouze pro země EU

V souladu se směrnici 91/157/EHS lze vadné nebo použité akumulátory/baterie odevzdat přímo na adresu Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Specifikace náhradních dílů, které mají být použity**

Zařízení je dodáváno bez náhradních dílů. V případě potřeby kontaktujte náš servis na čísle +49 931/90803000.

### **Technické údaje**

Produkt: Hyagen Stick

Rozměry: 15,5 x 4 x 3,5 cm

Otáčky za minutu: 12000 Spotřeba energie:  
0,2W

