



Hyagen

NL | NL



*Roller*

## Welkom in de wereld van Hyagen® Roller

Sinds de jaren 1950 zijn de eerste pogingen gedaan met elektrische stroom in cosmetische behandelingen. Vanaf de jaren '90 werden de methodes steeds verfijnder.

De elektrofysische cosmetische behandeling is doorontwikkeld tot een effectieve behandelmethode op het gebied van anti-aging. Vooraanstaande wetenschappers zijn van mening dat elektrofysische cosmetica de kloof tussen traditionele en traditionele cosmetica kan overbruggen in termen van werkingsmechanisme en resultaten. cosmetica en cosmetische chirurgie .





## Wat is elektrocosmetica?

Het menselijk lichaam is een "vloeibare geleider van elektriciteit". Alle lichaamsvloeistoffen bevatten ionen, die ook permanent worden gevormd (bijvoorbeeld door zouten op te lossen). Als via een anodeplaat een kleine elektrische spanning op de huid wordt aangelegd, beginnen de elektrisch geladen deeltjes (ionen) die al in het lichaam aanwezig zijn, afhankelijk van hun elektrische lading, naar de anodeplaat te migreren.

Direct onder het huidoppervlak ontstaat beweging door de uitgeoefende spanning. Door deze permanente beweging van de ionen worden verzorgingsproducten optimaal opgenomen in de huid. De effectiviteit van het aanbrengen van verzorgingsproducten met de Hyagen® Roller overtreft die van een handmatige applicatie vele malen.

Bovendien kalmeren de ionenbewegingen de zenuwreceptoren en verbeteren ze de bloedcirculatie en lymfestroom. Hyagen® is het verzorgingsproduct dat perfect is afgestemd op de Hyagen® roller.



## *Functie modi:*

### **Absorptie / balans van actieve ingrediënten**

Klinische studies hebben aangetoond dat maximaal 15% van de actieve ingrediënten die in crèmes aanwezig zijn, de huidbarrière kunnen binnendringen wanneer ze met de hand worden aangebracht. Als de speciaal voor de Hyagen Roller ontwikkelde Hyagen®® Gel nu wordt gebruikt en met de Hyagen Roller in de huid wordt gewerkt door middel van de geactiveerde modus "actieve ingrediënt absorptie / balans", kan tot 80% van de actieve ingrediënten door de huidbarrière gaan om de werking volledig te kunnen ontwikkelen. ®

### **Heffen / Straffung**

Het verlies van collageen in de cellen is een van de belangrijkste redenen voor rimpelvorming. In de modus "Lifting" stimuleert het apparaat de natuurlijke trilling van de cellen. De stofwisseling van de cellen wordt verhoogd en collageen wordt weer in hogere mate aangemaakt. De huid wordt tegelijkertijd steviger en elastischer. De verhoogde stofwisseling verhoogt ook de vochtuitwisseling tussen de cellen. Het resultaat zijn cellen die meer vocht opnemen en zo de frisheid en elasticiteit van de huid herstellen en tegelijkertijd rimpels verminderen.



## Toepassing

### Absorptie / balans van actieve ingrediënten:

1

Breng Hyagen® Day and Night Serum Intense aan op je gezicht.

2


Zet het apparaat in de modus "Absorptie / balans van actieve ingrediënten".

3

Gebruik de Hyagen® Roller om het Hyagen® Day and Night Serum Intense zachtjes in je huid te masseren.

4

Stop met de behandeling zodra het verzorgingsproduct volledig door de huid is opgenomen. Was je gezicht niet na gebruik.

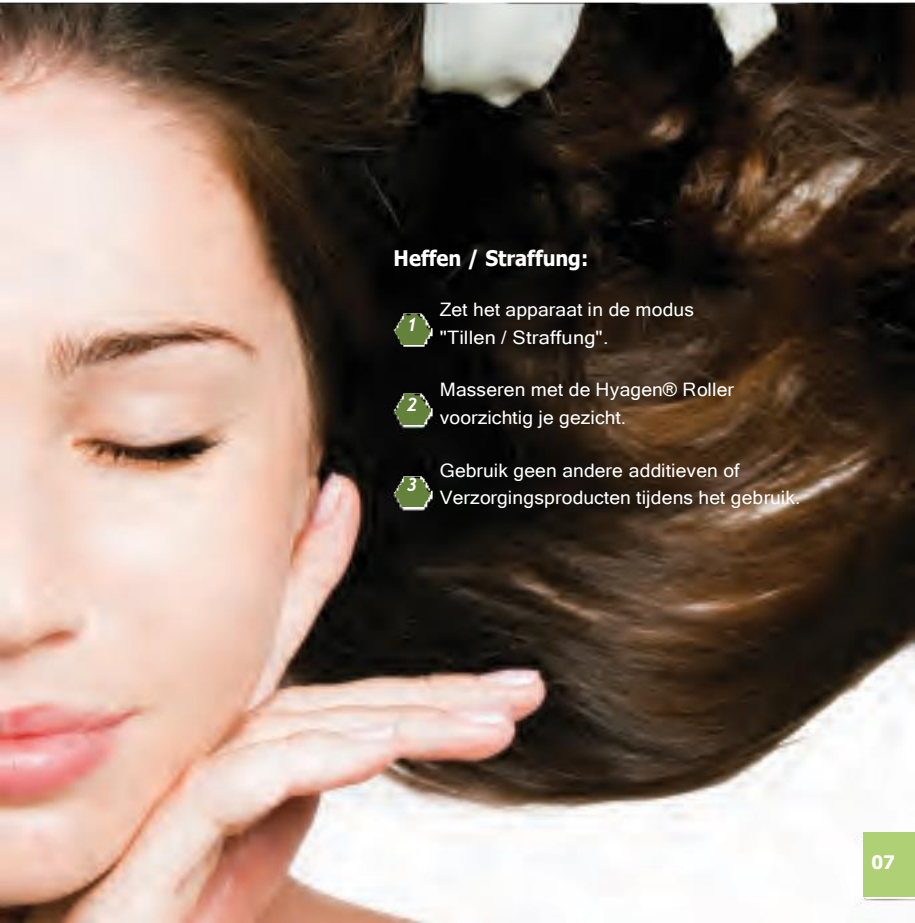

## Heffen / Straffung:

1

Zet het apparaat in de modus  
"Tillen / Straffung".

2

Masseren met de Hyagen® Roller  
voorzichtig je gezicht.

3

Gebruik geen andere additieven of  
Verzorgingsproducten tijdens het gebruik.





## Huid

Neutrale top	1 keer per dag; 5 - 10 minuten
Gevoelig / Fettige Hoog minuten	1 Meet alle 3-4 dagen; 5 - 10 minuten
Gevoelig einde / Extreem vette huid	1 keer per week, maximaal 5 minuten
Verouderde huid	1 keer per dag; 10 - 15 minuten
Ogen	De huid rond de ogen is erg gevoelig. Blijf maximaal 2 seconden op een punt staan.



*100% natuurlijk*

## *Hyagen® Dag en Nacht Serum Intens*

Hyagen® is een gel speciaal ontwikkeld voor de Hyagen Roller, die uitstekende verzorgende eigenschappen heeft en is verrijkt met speciale actieve ingrediënten die zijn ontwikkeld voor elektrofysische® cosmetische behandelingen.

Hyaluronzuur wordt van nature opgeslagen in de huid en in andere delen van ons lichaam. De stof wordt door het menselijk lichaam zelf geproduceerd en wordt gekenmerkt door tot 1000 keer de opslag van water in verhouding tot het eigen gewicht, waardoor een optimale hydratatie en stevigheid van de huid wordt gegarandeerd.

Met toenemende leeftijd neemt de productie van hyaluronzuur in het lichaam continu af. De huid verliest dichtheid, elasticiteit en soepelheid. Er ontstaan rimpels. Invloeden van buitenaf, zoals sterk zonlicht of vervuiling door de omgeving en stof, kunnen het optreden van huidvermoeidheid bevorderen en het verouderingsproces versnellen.

Door de verhoogde vochtopname heeft Hyagen® een bijzonder huidverstrakkend effect. Hyagen® - Day and Night Serum is 100% natuurlijk en bevat geen dierlijke ingrediënten. Hyaluronzuur wordt aangetroffen in alle cellen van het menselijk lichaam; Allergische reacties zijn daarom uiterst zeldzaam.

Dankzij biotechnologische productieprocessen wordt hyaluronzuur van dierlijke oorsprong achterwege gelaten.

## Onderhoud

- Regelmatig onderhoud en reiniging zorgt voor een optimaal resultaat en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Bewaar Hyagen scooters op een veilige, koele en droge plaats wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van het apparaat niet in gevaar te brengen, mogen er geen uitbreidingen, aanpassingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd.
- Uitbreidingen, nieuwe aanwervingen, wijzigingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door personen die door Canbolat Vertriebs GmbH zijn geautoriseerd.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Gebruik voor het reinigen een licht damp en zachte doek.
- Gebruik geen agressieve stoffen zoals schuurmelk of andere afwasmiddelen, deze kunnen het oppervlak aantasten.
- Repareer het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Verwijder cosmetica of andere resten van de Hyagen Roller na elk gebruik.
- Reinig het apparaat regelmatig met een schone doek.
- Gebruik geen water om het apparaat schoon te maken

## Waarschuwingen

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat is niet waterdicht - kom er niet mee in contact met water.
- Bewaar het apparaat in een droge omgeving.
- Zorg ervoor dat u het apparaat niet blootstelt aan sterke schokken, open het apparaat niet en probeer het niet te repareren.
- Mensen met metalen implantaten, pacemakers of zwangere vrouwen moeten voor gebruik een arts raadplegen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt bij wonden, eczeem of tumoren Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder piercings, oorbellen of andere metalen voorwerpen voor gebruik.
- Beweeg het ingeschakelde apparaat niet over de ogen. Gebruik het apparaat niet als u allergisch bent voor metaal.
- Plaats of gebruik het apparaat nooit in een natte of damp omgeving.
- Gebruik het apparaat niet onder water, bijv. onder de douche.
- Breng het apparaat nooit in direct contact met vuur, gas, zuurstof of hete voorwerpen zoals kookplaten.

- Behandel het apparaat voorzichtig, zodat het niet kan vallen of op een andere manier beschadigd kan raken.
- Als er problemen zijn met het apparaat, breng het dan onmiddellijk binnen voor reparatie. Probeer het niet zelf op te lossen.
- Koppel de AC-adapter los wanneer deze niet in gebruik is.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor uw veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet als handvat. Wanneer u de applicatie afsluit, zet u alle schakelaars op Uit/Ui/0 en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik verlengsnoeren alleen als je eerder hebt gecontroleerd of ze in goede staat zijn.  
Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- De Hyagen scooter mag alleen worden gebruikt voor het oorspronkelijke beoogde doel.

## Zin

Elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.



Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moet elektrisch gereedschap dat niet meer bruikbaar is, worden

worden gescheiden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycled.

Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet met het huisvuil mag worden weggegooid. AEEA bevat waardevolle recyclebare materialen die moeten worden gerecycled en om het milieu of de menselijke gezondheid niet te schaden door ongecontroleerde afvalverwijdering.

Gooi oude apparaten daarom weg via geschikte inzamelsystemen of stuur het apparaat naar de plaats waar u het hebt gekocht voor verwijdering. Hierdoor wordt het apparaat vervolgens verzonden voor materiaalrecycling.

Accumulatoren en batterijen

Gooi oplaadbare batterijen niet bij het huisvuil, water of vuur. Batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden ingezameld, gerecycled of afgevoerd.

Alleen voor EU-landen

In overeenstemming met Richtlijn 91/157/EEG kunnen defecte of gebruikte oplaadbare batterijen/batterijen rechtstreeks worden ingeleverd bij Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenastr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Specificatie van te gebruiken reserveonderdelen**

Het apparaat wordt geleverd zonder reserveonderdelen. Neem indien nodig contact op met onze dienst via 0931/90803000.

### **Specificaties**

Product: Afmetingen

Hyagen Roller: 13 x 4 x

13 cm

Rotatie per minuut: 20-30 Stroomverbruik:

0,18 W

