

Mode d'emploi original – AREBOS chaise de douche avec dossier

AREBOS

Chaise de douche avec dossier

AR-HE-BS61003



Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation en toute sécurité.



Merci pour la confiance que vous accordez à AREBOS.



Veillez lire et conserver ces instructions. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Protégez-vous et protégez les autres en suivant toutes les consignes de sécurité, avertissements et précautions. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages au produit ou à la propriété. Veuillez conserver les instructions pour référence future.

Sécurité

Explication des symboles



Ce produit ne doit pas être jeté avec Ménage Gaspiller

Symbole	Préambules	Symbole	Préambules
	Code de lot		Catalogue
	Avertissements et précautions		non stérile
	Médical		Fabriquer
	Nom du fabricant Adresse		Identification unique de l'appareil
	Marquage		Modèle
	Pays de fabrication		Importateur
	Mandataire européen		

Sécurité

- Lisez les instructions dans leur intégralité avant de les utiliser pour la première fois. Déballez le produit et assurez-vous que tous les composants sont inclus dans l'emballage et que le produit peut être endommagé pendant le transport. Si tel est le cas, veuillez contacter l'adresse de service ci-dessous.
- Il existe un risque particulier de glisser en s'asseyant et en se levant dans les baignoires ou les salles de douche humides, surtout si des additifs pour le bain ou des détergents sont utilisés.
- Après chaque installation, assurez-vous que la stabilité de votre chaise de douche est donnée.
- Le risque de basculement peut être augmenté en équilibrant les mouvements du corps.
- Si vous ne pouvez pas vous tenir suffisamment, demandez de l'aide à un assistant.
- N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression ou de produits chimiques agressifs et corrosifs pour le nettoyage.

Avertissement! Blessure!

- Une mauvaise utilisation de la chaise de douche peut entraîner des blessures.
- Ne vous tenez jamais debout sur la chaise de douche !

Avertissement! Risque de dommages !

- Une mauvaise utilisation de la chaise peut endommager le produit.
- N'utilisez pas la chaise si le produit est endommagé ou si le raccord à vis est desserré.


La chaise de douche ne doit pas être utilisée par des personnes

- Troubles cognitifs
- Troubles de l'équilibre fort
- Incapacité du siège

Contenu de la livraison

- Siège
- 4 pieds de chaise (télescopiques)
- Dossier
- Vis

Construction

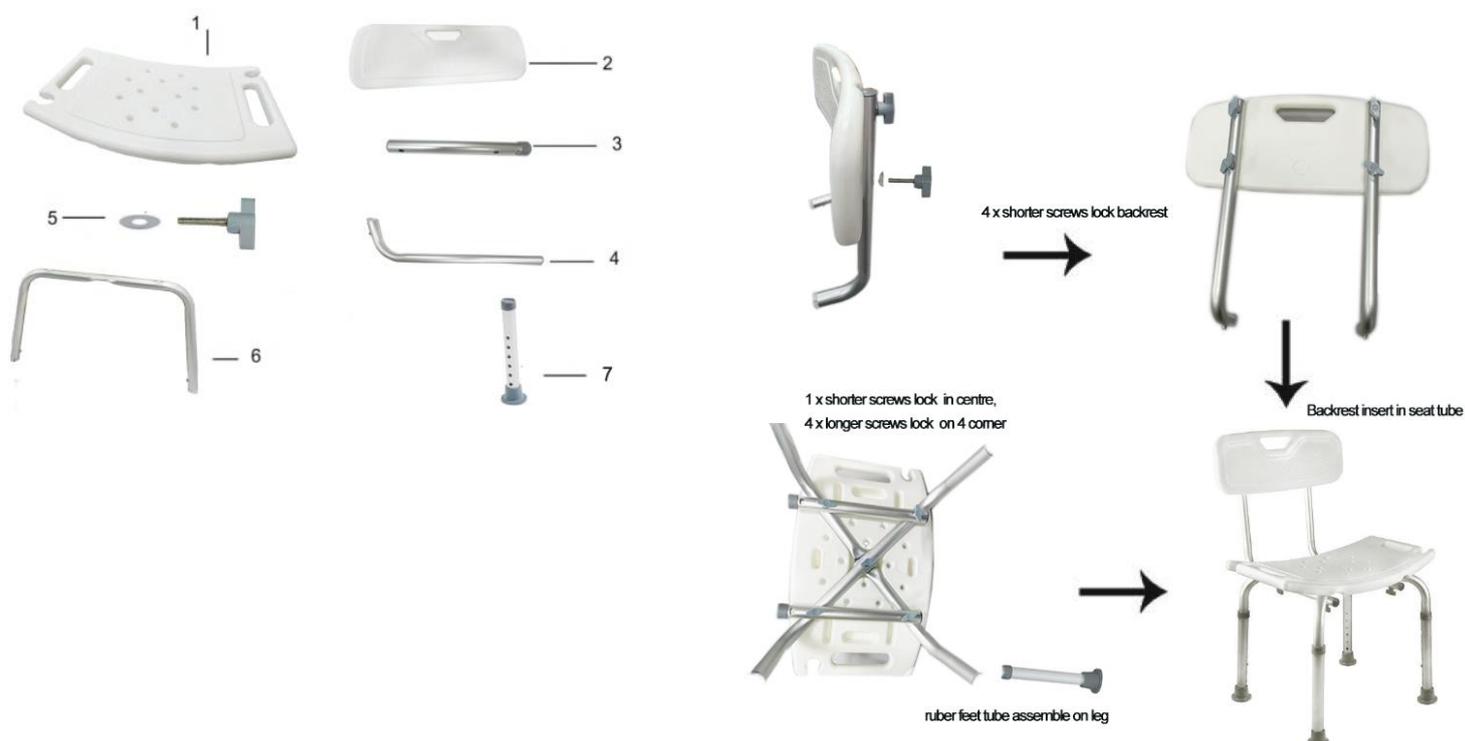

Réglage de la hauteur des pieds de la chaise

- En ajustant la hauteur des pieds de la chaise, la hauteur d'assise de la personne peut être ajustée individuellement. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton à ressort situé sur le pied de la chaise contre le tube télescopique. Faites ensuite glisser le tube dans la position souhaitée.



- **Avertissement!** Une fois ajusté, assurez-vous que le bouton à ressort s'enclenche dans l'un des trous existants. **Risque de chute !**
- Assurez-vous que tous les pieds de la chaise sont placés à la même hauteur.

Spécifications

Matériel	Aluminium/PEHD
Couleur	Argent/Blanc
Largeur du siège	env. 50 cm
Profondeur de l'assise	env. 30 cm
Siège	Réglable jusqu'à environ 52 cm
Poids	2,6 kg
Capacité de charge max.	env. 100 kg

Nettoyage et entretien

- Nous vous recommandons de nettoyer la chaise de douche après chaque utilisation. Vous pouvez essuyer la chaise avec un chiffon humide et vous pouvez utiliser des détergents doux pour les salissures plus importantes. Pour désinfecter le produit, vous pouvez utiliser un nettoyant de surface disponible dans le commerce.

Entretien

- La chaise de douche est conçue pour ne pas nécessiter d'entretien. Si la chaise est défectueuse, contactez le revendeur spécialisé pour remplacer le produit.

Élimination respectueuse de l'environnement

Élimination des emballages

- Veuillez prendre connaissance des directives et des normes applicables dans votre région pour l'élimination appropriée des emballages. Certains emballages peuvent être des sacs en plastique - faites très attention à ce qu'ils ne soient pas hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement !

Élimination des anciens équipements

- L'équipement doit être éliminé conformément aux règles et règlements locaux d'élimination des déchets.

Signification de la « poubelle »



Protégez notre environnement, les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères. Utilisez les points de collecte désignés pour l'élimination des appareils électriques et entrez vos équipements électriques et électroniques que vous n'utilisez plus. Ils aident à éviter l'impact potentiel d'une élimination inappropriée sur l'environnement et la santé humaine. Faites également votre part dans le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques . Vous pouvez obtenir des informations sur l'endroit où les appareils sont éliminés auprès de vos autorités locales ou de vos administrations locales, de vos municipalités ou de vos administrations municipales.

【Importateur】

Entreprise : Canbolat Vertriebs GmbH
Adresse : Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne



Numéro du service client : +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Déclaration de conformité UE

Nous, les

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

SN : DE-IM-000044811

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessous, tant en termes de conception et de construction que selon nos ventes, est conforme aux normes sanitaires pertinentes et fondamentales.

Nom du produit : Chaise de douche

AREBOS

N° d'article : 4260199756553

Numéro de modèle : AR-HE-BS61003

Base UDI-DI :697353654Chaise de
doucheD7

Classification : Classe I, selon le règlement

1, annexe II+III, règlement (UE) 2017/745

Si l'appareil est modifié sans notre accord, cette déclaration de conformité perd sa validité.

Testé par :

Annexe II+III du règlement (UE) 2017/745

EN ISO 14971:2019

EN ISO 15223-1:2021

EN ISO 20417 : 2021

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO 10993-5:2009

EN ISO 10993-10 : 2023

EN ISO 10993-23 : 2021

Date/Signature Fabricant/Lieu : Würzburg, 25.03.2025



Signature:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Représentant de ce mode d'emploi/données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Notre numéro de service client : +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE 263752326

Le tribunal du registre du commerce est le suivant : Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071