

Oryginalna instrukcja obsługi – Krzesło prysznicowe AREBOS z oparciem

AREBOS

Krzesło prysznicowe z oparciem

AR-HE-BS61003



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.



Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem tego produktu. Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenie produktu lub mienia. Zachowaj instrukcje na przyszłość.

Bezpieczeństwo

Objaśnienie symboli



Tego produktu nie wolno wyrzucać z Gospodarstwo domowe Marnować

Symbol	Preambuły	Symbol	Preambuły
	Kod-Ładowania		Numer katalogowy
	Ostrzeżenia i środki ostrożności		niesterylny
	Medyczny		Wyrób
	Nazwa producenta Adres		Unikalna identyfikacja urządzenia
	Znak CE		Model
	Kraj produkcji		Importer
	Autoryzowany przedstawiciel europejski		

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj instrukcję w całości przed pierwszym użyciem. Rozpakuj produkt i upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu i że produkt może ulec uszkodzeniu podczas transportu. W takim przypadku prosimy o kontakt z poniższym adresem serwisu.
- Istnieje szczególne ryzyko poślizgnięcia się podczas siadania i wstawania w wilgotnych wannach lub kabinach prysznicowych, zwłaszcza jeśli stosowane są dodatki do kąpeli lub detergenty.
- Po każdym montażu upewnij się, że zapewniona jest stabilność krzesła prysznicowego.
- Ryzyko przewrócenia się można zwiększyć, równoważąc ruchy ciała.
- Jeśli nie możesz utrzymać się wystarczająco, poproś o pomoc asystenta.
- Do czyszczenia nie używaj myjek ciśnieniowych ani, chemikaliów.

Ostrzeżenie! Szkoły!

- Niewłaściwe korzystanie z krzesła prysznicowego może prowadzić do obrażeń.
- Nigdy nie stawaj na krześle prysznicowym!

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Niewłaściwe użytkowanie krzesła może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie używaj krzesła, jeśli produkt jest uszkodzony lub połączenie śrubowe jest luźne.


Krzesło prysznicowe nie powinno być używane przez osoby z

- Zaburzenia poznawcze
- Zaburzenia silnej równowagi
- Niemożność siedzenia

Zakres dostawy

- Siedzenie
- 4 nogi krzesła (teleskopowe)
- Oparcie
- Śruba

Budowa

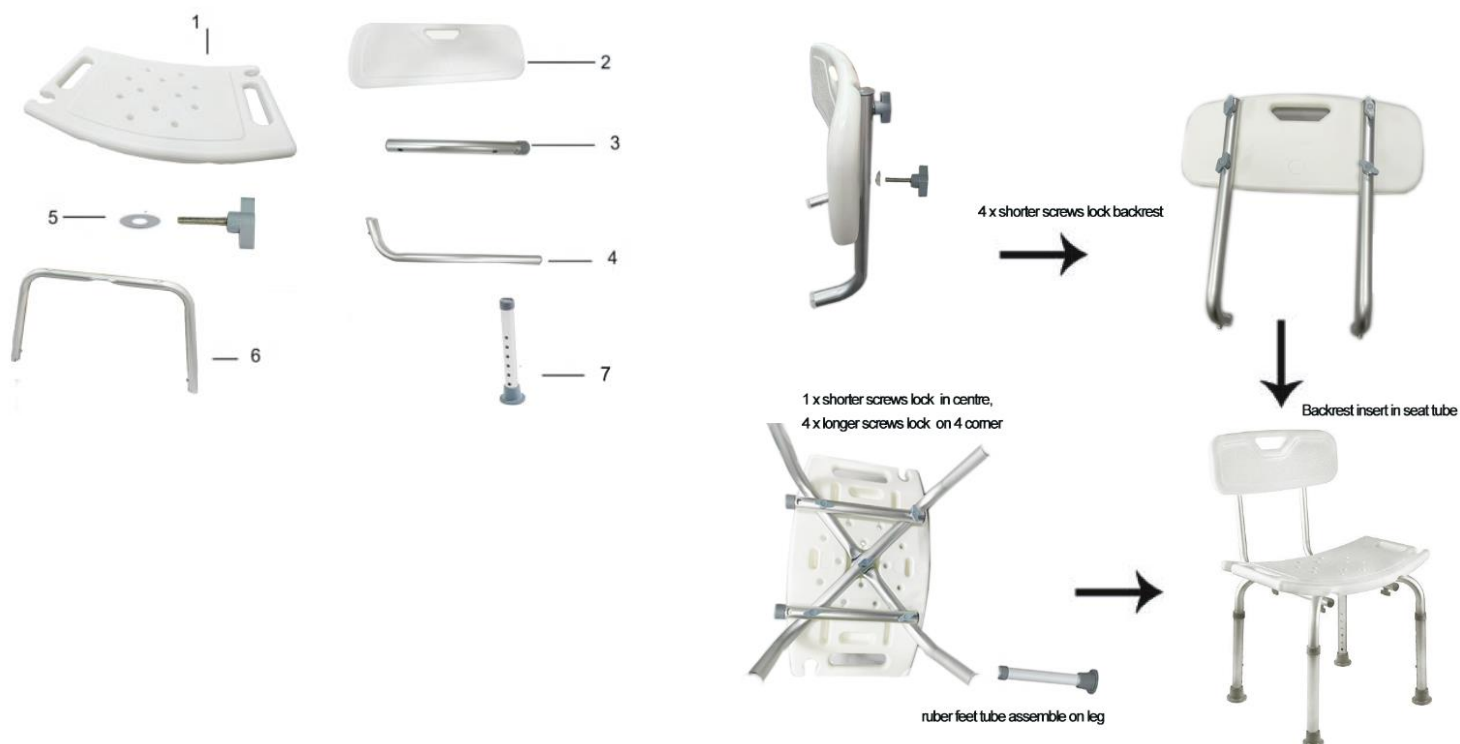

Regulacja wysokości nóg krzesła

- Regulując wysokość nóg krzesła, wysokość siedziska osoby można indywidualnie regulować. Aby to zrobić, musisz docisnąć przycisk sprężyny na nodze krzesła do rury teleskopowej. Następnie wsuń rurkę do żądanej pozycji.



- **Ostrzeżenie!** Po wyregulowaniu upewnij się, że pokrętło sprężyny zatrzaskuje się w jednym z istniejących otworów. **Ryzyko upadku!**
- Upewnij się, że wszystkie nogi krzesła są ustawione na tej samej wysokości.

Specyfikacje

Materiał	Aluminium/HDPE
Kolor	Srebrny/Biały
Szerokość siedziska	ok. 50 cm
Głębokość siedziska	ok. 30 cm
Siedzenie	Regulowany do ok. 52 cm
Ciężar	2,6 kg
Max. nośność	ok. 100 kg

Czyszczenie i pielęgnacja

- Zalecamy czyszczenie krzesła prysznicowego po każdym użyciu. Krzesło można przetrzeć wilgotną szmatką, a do mocniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych detergentów. Aby zdezynfekować produkt, możesz użyć dostępnego w handlu środka do czyszczenia powierzchni.

Konserwacja

- Krzesło prysznicowe zostało zaprojektowane tak, aby nie wymagało konserwacji. Jeśli krzesło jest uszkodzone, skontaktuj się ze specjalistycznym sprzedawcą w celu wymiany produktu.

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Utylizacja opakowań

- Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie dotyczącymi prawidłowej utylizacji opakowań. Niektóre z opakowań mogą być torbami foliowymi - należy zachować szczególną ostrożność, aby nie znajdowały się one poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

Utylizacja starego sprzętu

- Sprzęt należy utylizować zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.

Znaczenie "kosza na śmieci"



Chroń nasze środowisko, urządzenia elektryczne nie powinny wyrzucać do odpadów domowych. Skorzystaj z wyznaczonych punktów zbiórki urządzeń elektrycznych i wprowadź swój sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego już nie używasz. Pomagają uniknąć potencjalnego wpływu niewłaściwej utylizacji na środowisko i zdrowie ludzkie. Weź więc swój udział w recyklingu i innych formach odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego .
Informacje o tym, gdzie urządzenia są utylizowane, można uzyskać od władz lokalnych lub samorządów lokalnych, od gmin lub administracji gminnych.

【Importer】



Firma: Canbolat Vertriebs GmbH

Adres: Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Deklaracja zgodności UE

My, Duch Święty
Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy
SRN: DE-IM-000044811

Niniejszym oświadczamy, że wymieniony poniżej produkt, zarówno pod względem konstrukcyjnym i konstrukcyjnym, jak i zgodnie z naszą sprzedażą, jest zgodny z odpowiednimi i podstawowymi normami zdrowotnymi.

Nazwa produktu: Krzesło prysznicowe
AREBOS
Przedmiot nr 4260199756553
Model: AR-HE-BS61003
Podstawa UDI-DI:697353654DuschstuhID7
Klasyfikacja: Klasa I, zgodnie z prawidłem 1,
załącznikiem II+III, rozporządzeniem (UE)
2017/745

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność.

Testowane przez:

Załącznik II+III do rozporządzenia (UE) 2017/745
EN ISO 14971:2019
EN ISO 15223-1:2021
EN ISO 20417:2021
EN ISO 10993-1:2020
EN ISO 10993-5:2009
EN ISO 10993-10:2023
EN ISO 10993-23:2021

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 25.03.2025



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający
Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych
technicznych: Dipl.-Inform. (Uniw.) Korhan Canbolat, Dyrektor
Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym dla wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071