

Istruzioni d'uso originali – AREBOS Scaldapiedi

# AREBOS

## Scaldapiedi

AR-HE-FW\*



Si prega di seguire tutte le misure di sicurezza in questo manuale dell'utente per garantire un uso sicuro.

CE

Grazie per aver creduto in AREBOS.

# Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione e istruzioni di sicurezza .....</b>	<b>3</b>
1.1	Introduzione .....	3
1.2	Spiegazione dei simboli .....	3
1.3	Importanti istruzioni di sicurezza.....	5
1.4	Destinazione d'uso .....	8
<b>2</b>	<b>Contenuto della confezione / Parti di unità</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Istruzioni .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Utilizzo dello scaldapiedi .....</b>	<b>11</b>
4.1	Metodo di applicazione .....	11
4.2	Dopo l'uso.....	11
<b>5</b>	<b>Pulizia e manutenzione.....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Immagazzinamento .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Smaltimento ecologico .....</b>	<b>14</b>
8.1	Smaltimento e imballaggio .....	14
8.2	Smaltimento delle vecchie attrezzature .....	14
	<b>Dichiarazione di conformità UE .....</b>	<b>15</b>

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si consegna il prodotto a terzi, questo manuale deve essere consegnato con esso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

# 1 Introduzione e istruzioni di sicurezza

## 1.1 Introduzione

- Questo manuale di istruzioni ha lo scopo di familiarizzare con l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto. Per installare l'unità in modo sicuro e corretto, leggere le istruzioni per l'uso **prima di iniziare**.

## 1.2 Spiegazione dei simboli



**Avvertimento!** Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o danni. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro.



**Nota!** Estrarre la spina di rete.



**Avvertimento!** Rischio di tensione elettrica!



Utilizzare con cautela quando si utilizza questo articolo!

**⚠ AVVERTIMENTO!** Questo simbolo/parola di segnale indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può causare morte o lesioni gravi, se non evitato.

**⚠ CAUTELA!** Questo simbolo/parola di segnale indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o moderate, se non evitato.

**Nota!** Questo simbolo /parola di segnale ti avvisa di possibili danni alla proprietà.



Leggi le istruzioni per l'uso



Non inserire pin



Non utilizzare piegato o increspato



Non deve essere utilizzato da bambini molto piccoli (0-3) anni




Non candeggia



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare

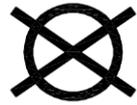

Non lavare a secco



Non lavare



Questo prodotto **non deve** essere smaltito con i rifiuti domestici!



Per mezzo di una marcatura CE, si può riconoscere che un prodotto è conforme ai requisiti legali delle norme legali europee e quindi può essere commercializzato all'interno della Comunità Europea.



Alloggiamento protettivo isolato (classe di protezione II)!



Questo prodotto è stato testato e certificato da TÜV Süd.  
Il simbolo "GS" sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

### 1.3 Importanti istruzioni di sicurezza

- La tua sicurezza è della massima importanza per noi. Assicurarsi di leggere questo libretto di istruzioni **prima** di tentare di installare e utilizzare l'accessorio. Se non sei sicuro di una qualsiasi delle informazioni contenute in questo opuscolo, contatta il rivenditore in cui hai acquistato la tua unità.
-  **AVVERTIMENTO!** Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso. La mancata osservanza delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/ o lesioni gravi. Conservare tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per riferimento futuro.
- **NON** utilizzare il prodotto fino a quando non si legge il manuale di istruzioni.
- Assicurati di aver letto attentamente il manuale di istruzioni e di aver compreso il contenuto prima di iniziare l'installazione.
- Le istruzioni sono nell'interesse della tua sicurezza.
-  **AVVERTIMENTO! Pericolo di soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

#### **AVVERTIMENTO! Rischio di scosse elettriche!**

L'installazione elettrica difettosa o l'eccessiva tensione di rete possono portare a scosse elettriche.

- Collegare lo scaldapiedi solo se la tensione di rete della presa della presa corrisponde alle specifiche sulla piastra di tipo dell'unità di controllo.
- Collegare solo lo scaldapiedi a una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente lo scaldapiedi dalla rete in caso di malfunzionamento.
- Non utilizzare lo scaldapiedi se presenta danni visibili o se i cavi o le spine sono difettosi.
- Se un cavo dell'unità di controllo è danneggiato, l'unità di controllo deve essere sostituita con un pezzo di ricambio originale.
- Non aprire l'alloggiamento dell'unità di controllo, ma lasciare la riparazione a specialisti per evitare pericoli. Contatta un'officina specializzata per questo scopo. Sono escluse rivendicazioni di responsabilità e garanzia in caso di riparazioni effettuate in modo indipendente, connessione impropria o funzionamento errato.
- Solo le parti che corrispondono ai dati originali dell'apparecchio possono essere utilizzate per le riparazioni. Questo scaldapiedi contiene parti elettriche e meccaniche essenziali per la protezione contro le fonti di pericolo.
- Lo scaldapiedi non deve essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non estrarre mai la spina di rete dalla presa dal cavo di rete, afferrare sempre la spina di rete.
- Tenere il piede più caldo, le spine e i cavi lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Non piegare i cavi o posizionarli su spigoli vivi.
- Assicurati che i bambini non infilino oggetti nello scaldapiedi.
- Quando non si utilizza lo scaldapiedi, lo si pulisce o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre lo scaldapiedi e scollegare la spina di rete dalla presa.

**⚠ AVVERTIMENTO! Pericolo per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).**

- Questo scaldapiedi può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dello scaldapiedi in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con lo scaldapiedi. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano otto anni o più e siano sorvegliati.
- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dallo scaldapiedi e dal pannello di controllo con i suoi cavi.
- I bambini di età inferiore ai tre anni non devono usare questo scaldapiedi in quanto non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- Lo scaldapiedi non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone vulnerabili che non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- Non lasciare lo scaldapiedi incustodito durante il funzionamento.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola per imballaggio. Possono rimanere intrappolati mentre giocano e soffocare.

**⚠ CAUTELA! Rischio di lesioni!**

C'è il rischio di lesioni da cavi che si trovano intorno.

- Posare i cavi in modo che non diventino un pericolo di inciampo. Evitare inoltre di utilizzare una prolunga. Soprattutto dopo il risveglio, c'è un aumentato rischio di inciampare a causa dei cavi che si trovano in giro.

**⚠ CAUTELA! Rischio di danni alla salute!**

L'uso prolungato al più alto livello può causare irritazione o disagio della pelle.

- Utilizzare sempre lo scaldapiedi brevemente all'inizio e non al più alto livello. Controllare la pelle prima di aumentare la potenza e la durata di utilizzo.
- Smetti di usare immediatamente lo scaldapiedi se trovi il calore dello scaldapiedi scomodo o doloroso.
- Assicurarsi di non addormentarsi durante l'uso. Se si diventa molto stanchi durante l'uso, selezionare l'impostazione 1 per sicurezza.

**NOTA! Rischio di danni!**

Una manipolazione impropria dello scaldapiedi può causare danni allo scaldapiedi.

- Non accendere lo scaldapiedi quando è piegato o spinto insieme.
- Non tirare lo scaldapiedi in un copriletto e non mettere lo scaldapiedi intorno al materasso.
- Non pizzicare o piegare lo scaldapiedi.
- Non accendere lo scaldapiedi quando è ancora umido, ad esempio dopo la pulizia.
- Non posizionare oggetti grandi o pesanti, come valigie, coperte di lana e borse, sullo scaldapiedi durante il funzionamento.
- Non posizionare fonti di calore, come bottiglia di acqua calda, piastra riscaldante o simili, sullo scaldapiedi durante il funzionamento.
- Prima di ogni utilizzo su un letto regolabile o nel caso di materassi divisi, assicurarsi che lo scaldapiedi o il cavo di alimentazione non siano pizzicati o spinti insieme.

- Prima di ogni utilizzo, verificare che lo scaldapiedi, il pannello di controllo e il cavo di alimentazione non presentino segni di usura o danneggiamento. Se tali segni sono presenti o se lo scaldapiedi è stato usato in modo improprio, è necessario farlo controllare da un'officina specializzata prima di riutilizzarlo. In questo caso, contattare l'indirizzo di servizio indicato sulla scheda di garanzia.
- Non inserire aghi o altri oggetti appuntiti nello scaldapiedi. lo scaldapiedi.
- Conservare lo scaldapiedi in un luogo asciutto.
- Lo scaldapiedi non deve essere utilizzato bagnato.

**Per ridurre il rischio di lesioni personali o danni alla proprietà, è necessario osservare importanti istruzioni di sicurezza di base, tra cui:**

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per riferimento futuro. Assicurarsi prima dell'uso di sapere come funziona lo scaldapiedi e come utilizzarlo.
- Spegnerne sempre l'alimentazione alla presa di corrente prima di inserire o rimuovere una spina. Rimuovere afferrando la spina - non tirare il cavo.
- Spegnerne l'alimentazione e rimuovere la spina quando lo scaldapiedi non è in uso o prima della pulizia.
- Utilizzare sempre lo scaldapiedi da una presa di corrente della tensione (solo AC) contrassegnata sull'etichetta di valutazione.
- Utilizzare solo il tipo di controller contrassegnato sull'etichetta di classificazione.
- Usato come scaldapiedi sotto i piedi o sopra lo scaldapiedi.
- Non usare se è umido o bagnato.
- Questo scaldapiedi non è destinato all'uso medico negli ospedali.
- Non utilizzare insieme ad un altro apparecchio di riscaldamento.
- Durante l'uso, assicurarsi che lo scaldapiedi e i cavi di alimentazione non rimangano intrappolati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Esaminare frequentemente lo scaldapiedi per verificare che non vi siano segni di usura o danni. Se vengono individuati danni/usura, non utilizzare lo scaldapiedi e chiedere una consulenza specialistica.
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito solo dal fabbricante, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate al fine di evitare un pericolo.
- L'apparecchio deve essere restituito al fabbricante o al suo mandatario in caso di rottura del collegamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai tre anni a meno che i controlli non siano stati preimpostati da un genitore o tutore o a meno che il bambino non sia stato adeguatamente istruito su come utilizzare i comandi in sicurezza.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e da altre persone molto vulnerabili che non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- I bambini di età inferiore ai tre anni non devono utilizzare questo apparecchio a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.

- L'interruttore o l'unità di controllo non deve bagnarsi durante il lavaggio e che durante l'asciugatura il cavo deve essere posizionato in modo da garantire che l'acqua non fluisca nell'interruttore o nel comando.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato per riscaldare gli animali.
- Le scarpe da esterno devono essere rimosse prima dell'uso!

#### **1.4 Destinazione d'uso**

- Lo scaldapiedi è progettato esclusivamente per l'uso in abitazioni private come descritto in queste istruzioni. Lo scaldapiedi può essere utilizzato solo come copertura, non come base.
- È destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti interni asciutti e non è adatto per uso commerciale in ospedali, ambulatori, ecc.
- Lo scaldapiedi non è un dispositivo medico e non è adatto a scopi terapeutici.
- Utilizzare solo lo scaldapiedi come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni alla proprietà o addirittura lesioni personali. Lo scaldapiedi non è un giocattolo per bambini.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o scorretto.

## 2 Contenuto della confezione / Parti di unità

Controlla lo scaldapiedi e la fornitura

### **NOTA! Rischio di danni!**

Se apri la confezione con noncuranza con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, lo scaldapiedi può essere danneggiato rapidamente.



- Fare molta attenzione quando si apre la confezione.

- Togliere lo scaldapiedi dalla confezione e verificare se lo scaldapiedi o le singole parti mostrano danni. In questo caso, non utilizzare lo scaldapiedi.
- Contatta il nostro servizio clienti (vedi sotto per i dettagli di contatto).
- Verificare che la consegna sia completa.
- Staccare qualsiasi pellicola protettiva.
- Rimuovere il materiale di imballaggio.



No.	Designazione
1	Scaldapiedi
2	Cavo di collegamento
3	Pannello di controllo

### Pannello di controllo con display

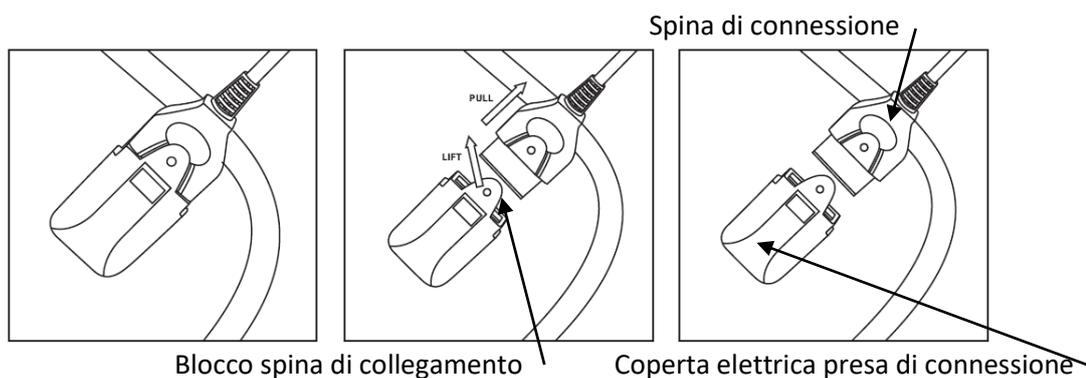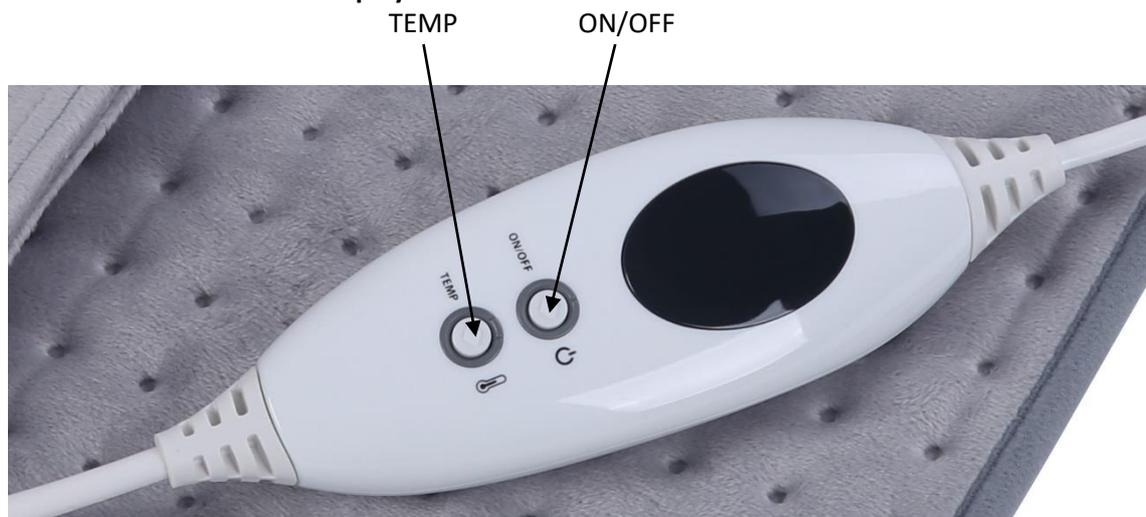

## 3 Istruzioni

- Questo scaldapiedi è destinato ad essere utilizzato come "THROW" o "OVER FOOT WARMER" e quindi deve essere sempre posizionato sopra un individuo, non sotto di loro, o sulla parte superiore di un lenzuolo. Non deve essere usato come "scaldapiedi".
- Collegare il controller allo scaldapiedi (lo scaldapiedi ha una presa collegata in cui si inserisce il controller) e assicurarsi che sia completamente collegato.
- Assicurarsi che ci sia una rete elettrica nelle vicinanze e che quando è in uso, il cavo di rete non sarà in una posizione che potrebbe far inciampare le persone su di esso. Quando è collegato alla rete elettrica, il controller deve essere facilmente raggiungibile dall'utente.

## 4 Utilizzo dello scaldapiedi

Per il controller KS6:



### 4.1 Metodo di applicazione

- **Premere il tasto on / off per 3 secondi per avviarsi.** Si prega di impostare il preriscaldamento al tocco più alto "6" posizione 30-60 minuti prima dell'uso. Durante l'utilizzo, selezionare la posizione di tocco appropriata "1-2-3-4-5-6" in base alle sensazioni del corpo umano. Se vai a dormire o lo usi per un lungo periodo, ti preghiamo di impostare la posizione del rubinetto "1" che è la posizione più bassa in modo da evitare il surriscaldamento che potrebbe causare disagio al corpo umano.
- Utilizzare il pulsante timer per impostare il tempo massimo di funzionamento, 45 minuti o 90 minuti. Ad esempio, se si sceglie 90 minuti, dopo 90 minuti lo scaldapiedi si spegne automaticamente.


### NOTA!

- Se il display è "P", verificare se l'accoppiatore del prodotto è stato collegato saldamente o meno, quindi riavviarlo. Se il guasto non può essere rimosso, significa che la connessione interna del prodotto ha problemi e deve chiedere aiuto al servizio post-vendita.
- Se il display è "E", significa che il prodotto è stato rotto.
- **Se la temperatura sul controller viene visualizzata come "C", il che significa che il controller è stato surriscaldato, scollegare la piastra riscaldante dalla rete elettrica e attendere che il controller si raffreddi, quindi è sicuro da usare.**

### 4.2 Dopo l'uso

Quando lo scaldapiedi non è in uso, si prega di spostare il controller in posizione off; rimuovere la spina dalla presa di corrente. Se lo scaldapiedi non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, conservare lo scaldapiedi in un luogo fresco e asciutto.

Per rimuovere il controller, sollevare la linguetta di bloccaggio con il dito e estrarre direttamente la spina. Non tirare il cavo del controller e non provare a estrarre la spina del controller senza sollevare la linguetta di bloccaggio in quanto si danneggerebbe la presa.

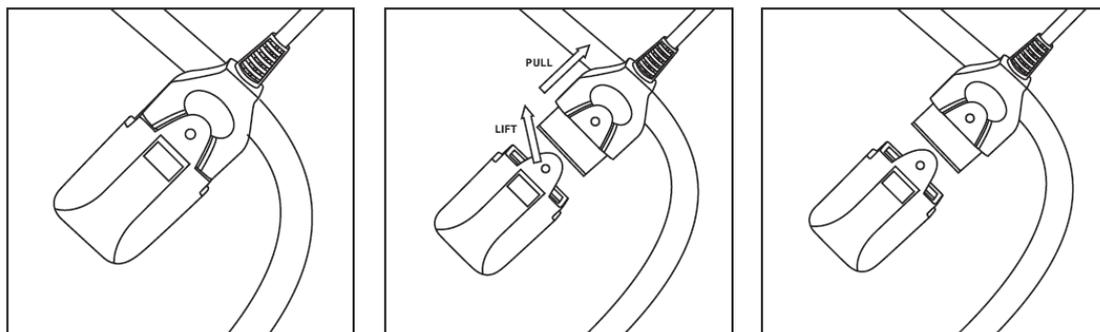

**⚠ AVVERTIMENTO! Rischio di ustioni!**

L'uso prolungato all'impostazione più alta può portare a ustioni. Per evitare ustioni alla pelle, testare la temperatura prima dell'uso con il dorso della mano (non il palmo, in quanto è meno sensibile di altre parti del corpo). Non utilizzare la piastra riscaldante direttamente sulla pelle.

## 5 Pulizia e manutenzione

**⚠ AVVERTIMENTO! Rischio di scosse elettriche!**

L'umidità può causare scosse elettriche.

- Scollegare la spina di rete dalla presa prima di pulire lo scaldapiedi.
- Non immergere lo scaldapiedi o qualsiasi cavo o spina in acqua o altri liquidi.
- Non immergere il pannello di controllo in acqua o metterlo in lavatrice.

**NOTA! Rischio di danni!**

Una manipolazione impropria dello scaldapiedi può causare danni allo scaldapiedi.

- Lo scaldapiedi non deve essere lavato a secco, stirato, strizzato o stritato.
- Quando non è in uso e prima di pulire lo scaldapiedi, scollegarlo dalla rete elettrica.
- Scollegare il controller o i controller dallo scaldapiedi.
- NON immergere i controller in acqua o bagnarli.
- Pulire la superficie del cavo con detergente neutro se il cavo è sporco e asciugarlo con un panno morbido.
- Non immergere il controller in acqua o bagnarlo affatto.
- Non lavare a secco questo scaldapiedi in quanto potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti.
- Non utilizzare solventi industriali come benzene, cherosene o solventi simili per pulirlo.
- È possibile lavare in lavatrice lo scaldapiedi; tuttavia, pulirlo a mano prolungherà la vita dello scaldapiedi. Per lavare in lavatrice, rimuovere il controller e posizionare lo scaldapiedi in un sacchetto a rete e sigillarlo. Utilizzare una piccola quantità di detersivo e impostare la lavatrice su un "Lavaggio delicato" con una temperatura massima di 40°. Una volta lavato, rimuovere lo scaldapiedi dal sacchetto della rete e drappeggiarlo su una linea di vestiti per asciugare. Non usare mollette per fissarlo.
- NON strizzare lo scaldapiedi
- NON asciugare con asciugatrice
- NON stirare lo scaldapiedi
- NON asciugare lo scaldapiedi al sole.

- NON collegarlo alla rete elettrica per asciugarlo
- NON utilizzare un apparecchio come un asciugacapelli per asciugarlo
- Lasciare asciugare naturalmente lo scaldapiedi.
- NON utilizzare lo scaldapiedi se è umido o bagnato.
- Non cercare di riparare lo scaldapiedi se difettoso - fallo guardare da una persona qualificata.
- Esaminare frequentemente lo scaldapiedi per verificare che non vi siano segni di usura o danni. Se vengono individuati danni/usura, non utilizzare lo scaldapiedi e chiedere una consulenza specialistica.
- Se il cavo di alimentazione o il controller sono danneggiati, non aprirli o tentare di ripararli in quanto devono essere sottoposti a manutenzione da una persona qualificata.

## 6 Immagazzinamento

- Quando non è in uso, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo, quindi piegare delicatamente lo scaldapiedi e riposizionarlo nel sacchetto in cui è arrivato.
- Assicurarsi che lo scaldapiedi sia asciutto prima di piegarlo e riporlo. Lo scaldapiedi deve essere appeso in un luogo ventilato per asciugare naturalmente.
- Non usare agenti antitarne sullo scaldapiedi.
- L'isolamento dello scaldapiedi sarà danneggiato se lo scaldapiedi viene asciugato sotto il sole, stirato o quando vengono utilizzati agenti antitarne. I danni sul materiale isolante causeranno problemi di sicurezza.
- Non piegare l'apparecchio posizionando sopra di esso gli oggetti durante lo stoccaggio.
- Lo scaldapiedi deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.

## 7 Dati tecnici

<b>Modello</b>	<b>AR-HE-FW*</b>
AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 / AR-HE-FWHG – 4252023105255	
Tensione di rete	220-240 V ~ 50 Hz
Classe di protezione	II <input type="checkbox"/>
Potenza	100 W

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ottiche all'articolo nel corso di miglioramenti del prodotto.

## 8 Smaltimento ecologico

**⚠ AVVERTIMENTO! Pericolo di soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

### 8.1 Smaltimento e imballaggio

- L'imballaggio della tua unità è costituito da materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi riducono l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un bidone per materiali riciclabili.

### 8.2 Smaltimento delle vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e i regolamenti dell'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti. Verificare con l'amministrazione locale l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegnare l'apparecchio lì.



Il simbolo della pattumiera barrata su un rifiuto di apparecchiature elettriche o elettroniche indica che non deve essere smaltito con rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. I punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili gratuitamente nella tua zona. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi scoprire altre opzioni di reso create da noi sul nostro sito web [www.arebos.de](http://www.arebos.de).



La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche è destinata a consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche e ad evitare le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

**Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**L'indirizzo** di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di identificazione IVA: DE 263752326

Il tribunale di registrazione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg. No. DE 61617071

## Dichiarazione di conformità UE



Noi, il

**Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Germania

dichiarare in esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:

Marchio

**AREBOS**

Nome del prodotto

Scaldapiedi

Modello di prodotto

AR-HE-FW\*

Numero articolo

AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 /  
AR-HE-FWHG - 4252023105255

è stato sviluppato, costruito  
e fabbricati in conformità  
con i requisiti del

2014/30/UE  
2014/35/UE  
2011/65/UE / 2015/863/UE

**Direttive europee:**

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme all'Unione Europea competente  
legislazione di armonizzazione.

La valutazione si basa sul  
seguente applicato **armonizzato**  
**norme:**

EN 60335-2-81:2003/A2:2012  
EN 60335-1:2012/A2:2019  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Altre norme e specifiche tecniche  
applicare:

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Luogo e data di rilascio:

Würzburg, 15.07.2022

Firma:

(Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde  
la sua validità.